


## PARAMETRIZAÇÃO DE ALARMES DOS MONITORES NA RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA

### ETAPA 1 (padrão)

O monitor deve estar com os ajustes padronizados na admissão - zerar parâmetros após alta do paciente anterior.

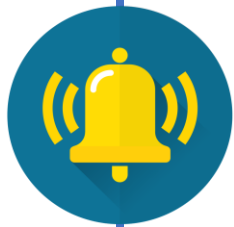

### ETAPA 2 (Registro)

Prescrição médica de parâmetros específicos, de acordo com a condição clínica do paciente ou alteração basal de sinais vitais.

### ETAPA 3 (Parametrização)

Ajustes dos alarmes na admissão em RPA, de acordo com a condição clínica do paciente e baseando-se nos sinais vitais antes da anestesia já definidos em prescrição médica.

Parâmetro	Valores
PA Sistólica	90-160 mmHg
PA diastólica	50-100 mmHg
FC	50-100 bpm
SO2%	90-100%

Parâmetro	Recomendação de parametrização individualizada mediante valores basais*			
	140-150 mmHg	151-160 mmHg	161-170 mmHg	171-180 mmHg
<b>PA sistólica pré-indução</b>	140-150 mmHg	151-160 mmHg	161-170 mmHg	171-180 mmHg
Limite máximo do alarme	170-180 mmHg (20%)	180-190 mmHg (20%)	180-190 mmHg (10%)	190-200mmHg (10%)
Limite mínimo do alarme	Padrão (Não ajustar)	Padrão (Não ajustar)	100-110 mmHg (>30%)	110-120mmHg (>30%)
<b>PA diastólica pré-indução</b>	40-50 mmHg	90-100mmHg	101-110mmHg	110-120 mmHg
Limite máximo do alarme	Padrão (Não ajustar)	110-120mmHg (20%)	120-130mmHg (20%)	120-130 mmHg (10%)
Limite mínimo do alarme	30-40mmHg (>20%)	Padrão (Não ajustar)	Padrão (Não ajustar)	Padrão (Não ajustar)
<b>PAM pré-indução</b>	40-50mmHg	50-60mmHg	100-110mmHg	110-120mmHg
Limite máximo do alarme	Padrão (Não ajustar)	Padrão (Não ajustar)	110-120 mmHg (10%)	120-130 mmHg (10%)
Limite mínimo do alarme	30-40 mmHg (>10%)	35-45 mmHg (>10%)	Padrão (Não ajustar)	Padrão (Não ajustar)
<b>FC pré-indução</b>	35-40 bpm	40-50 bpm	100-120 bpm	120-140 bpm
Limite máximo do alarme	Padrão (Não ajustar)	Padrão (Não ajustar)	120-140bpm (20%)	130-150 bpm (10%)
Limite mínimo do alarme	30-35bpm (10%)	35-45bpm (10%)	Padrão (Não ajustar)	Padrão (Não ajustar)
<b>SO2% pré-indução</b>	80-85%	85-90%	90-94%	>94%
Limite máximo do alarme	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão
Limite mínimo do alarme	Padrão	85-95%	85-90%	Padrão